

# TX

## 7000

### 灵敏、可靠、操作方便的 全自动总氯分析仪



TSHR TX 7000 总氯分析仪能够快速、准确的测量液态烃样品低浓度的氯含量。分析仪垂直燃烧管的紧凑设计，同时满足各种样品分析数量的用户，为他们提供安全易用的总氯分析。

样品通过 HR 7000 液体自动进样器进入无氧区域加热，保证样品完全气化。气化的样品通过载气带入含氧气的两段式燃烧区中，充分的氧化燃烧。燃烧后的气体经过硫酸洗涤器，去除水分和其他干扰杂质。

处理后的燃烧气进入微库仑滴定池，气体中的卤素离子与滴定池内的银离子发生反应，生成银离子所需的电荷量与卤素离子的浓度直接相关联定量。处理一次微库仑滴定池可以至少分析 60 个样品。

HR 7000 液体样品全自动进样器的设计拥有高性能，可靠的自动进样功能，可配置 121 位进样盘，另外也可以选择带有加热或制冷功能的样品盘。

TX 7000 总氯分析仪的分析与样品基质无关，完全遵循 ASTM, DIN, IP, UOP 和 CEN 标准方法。

#### 关键优势

紧凑和坚固耐用的设计

精准、快速和可靠的  
总氯分析数据

标配 HR 7000 液体样品全自动进样器，实现分析完全自动化

易于使用的微库仑滴定池

增强的液体  
和液化气 / 气体应用范围



## 分析指标

样品基质*	有机液体
工作范围	0.1 - 5,000mg/kg
样品量	1 - 80 µL
分析时间	< 10 分钟
相对标准偏差*	< 2% ( > 1 ppm )
样品类型	高沸点和低沸点的样品
最高沸点	450°C ( 取决于样品的性质 )
执行标准	ASTM D4929, ASTM D5194, ASTM D5808, UOP779, UOP910

\*取决于典型应用和样品性质

## 技术参数

加热炉电压	2 x 24 V, 50/60 Hz
加热炉功率	2 x 300 W
加热炉温度传感器	2 x Ni-Cr/Ni
加热炉配置	两段式温度控制
加热炉温度	最高1250 °C
分析类型	总氯 ( 可选项: 微库仑滴定法总硫 )
检测原理	微库仑滴定法
外型尺寸	600 x 1100 x 580mm ( 长 x 高 x 宽 )
计算机操作系统	Windows 7英文专业版或更高版本
计算机	Intel Core i3/ AMDPhenom或更高配置
软件	Athena
标准配置**	HR 7000 液体样品全自动进样器, 使用 2ml 样品瓶
可选附件	GM 7000 液化气 / 气体进样器

\*\* TX 7000 总氯分析仪操作时, 需要配置 HR 7000 液体样品全自动进样器

## 设备要求

电压	115/230 V, 50/60 Hz
功率	1200 W
气体连接	1/8 " 连接管件
气体	氧气 ( 99.6% ) 医用级 2.6 或者氧气 ( 99.995% ) 4.5 氩气 ( 99.998% ) 工业级 4.8
气体压力	2 - 3 Bar ( 30 - 45 psi )
环境温度	5 - 35 °C ( 41 - 95 °F )

## 联系方式

技术支持:	technicalsupport@tshrinternational.com
销售:	sales@tshrinternational.com
其他信息:	info@tshrinternational.com
TSHR 网站:	www.tshrinternational.com

更多详细信息请联系您当地的经销商

## INTERMASS FISCHER-ASIA PTE LTD

北京仪方飞希尔科技有限公司

北京市朝阳区曙光西里甲 6 号时间国际 A 座 1802 室


电话: 010-5867 8333

传真: 010-5867 8301

邮箱: ifac@intermasschina.com

网址: www.intermass.com.cn

000.TSHR.PS.TX001.1

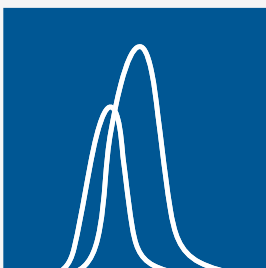

燃烧元素分析

领域的最佳

合作伙伴

